
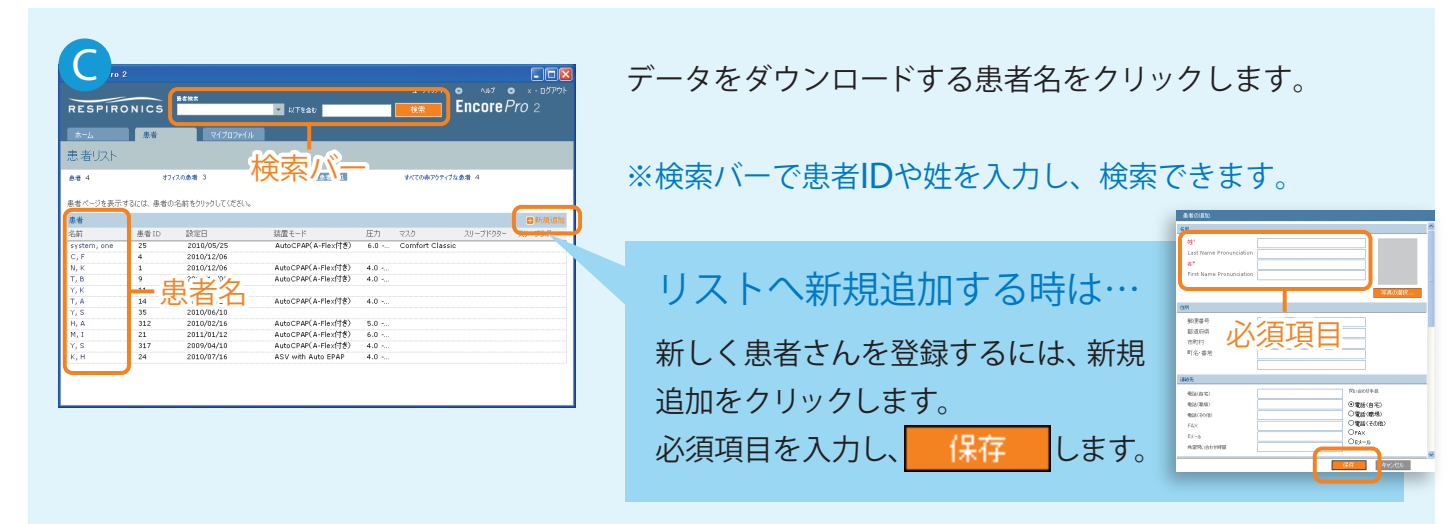
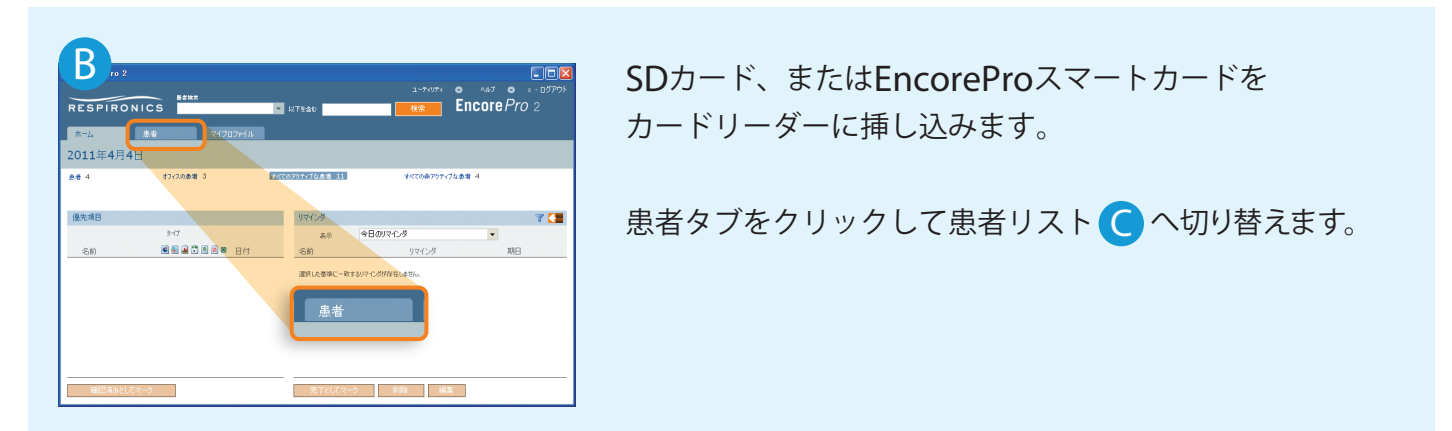
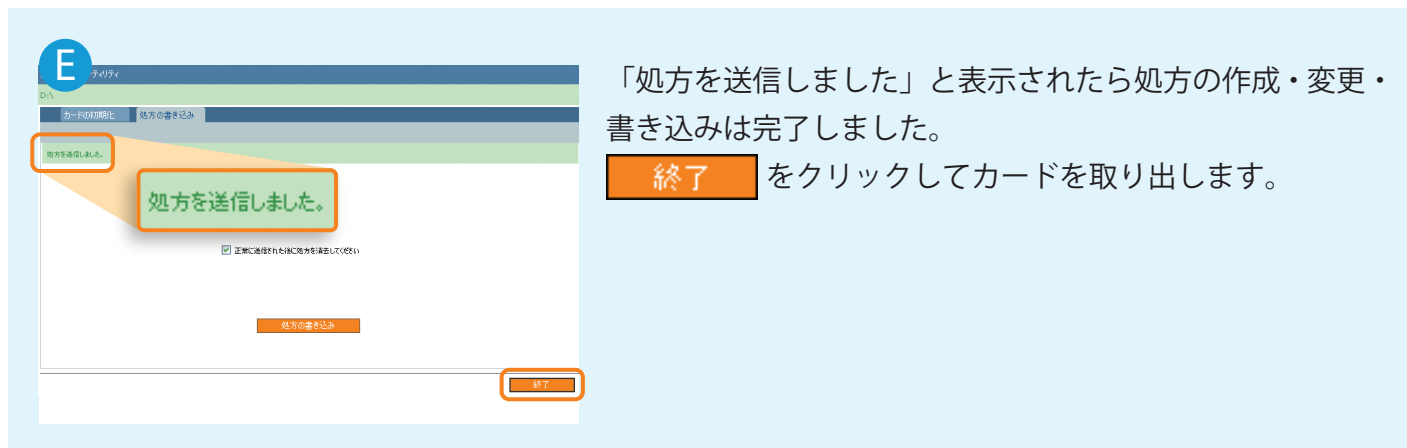
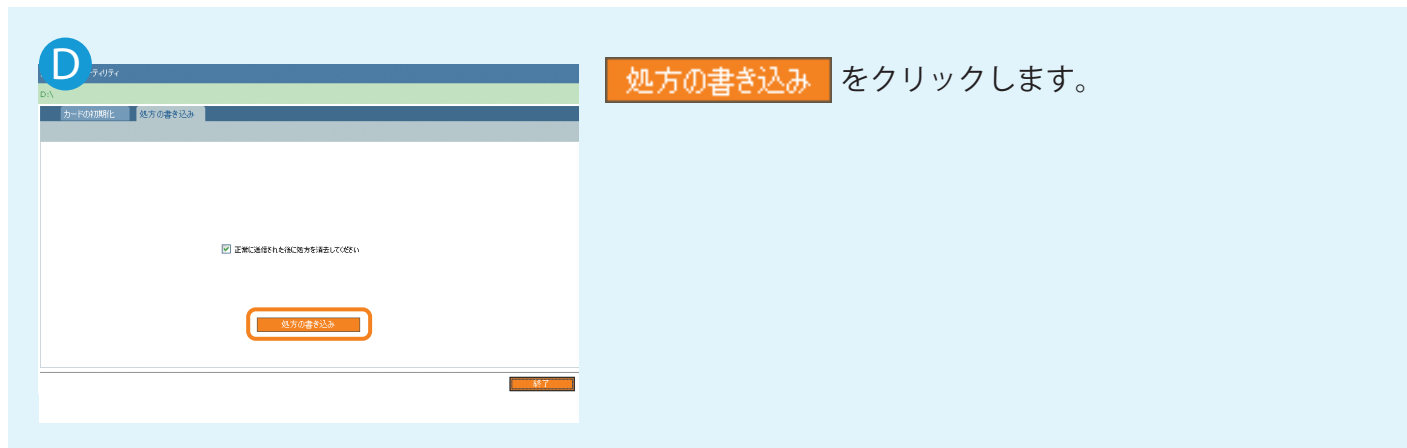


EncorePro 2の使い方

※本書は取扱説明書にかわるものではありません。必ず正式な取扱説明書をご覧ください。

1 カードからデータをダウンロードする

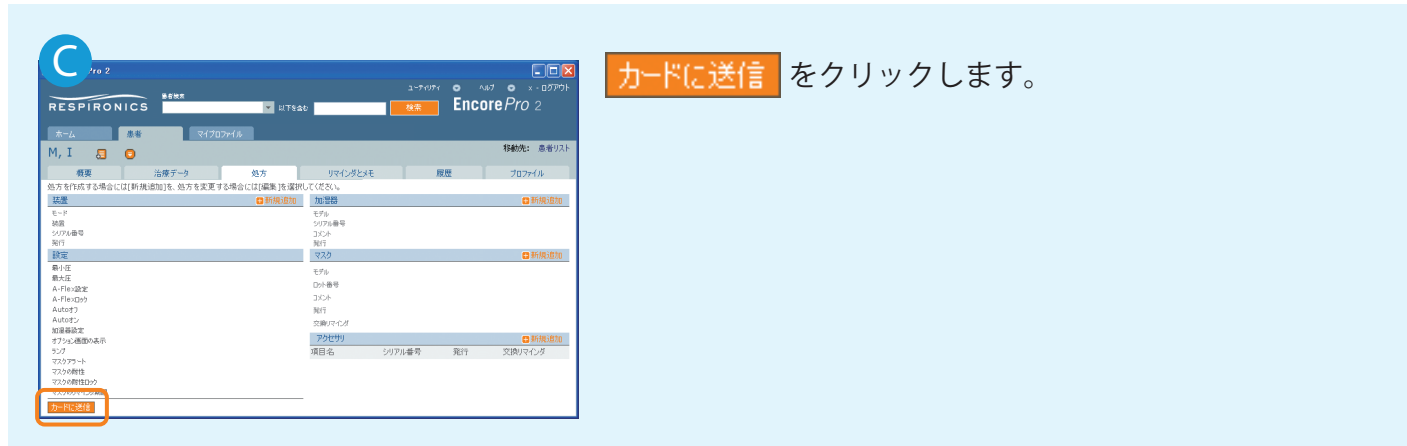


製造販売業者
フィリップス・レスピロニクス合同会社
〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目825番地1
本社 〒108-8507 東京都港区港南二丁目13番37号 フィリップスビル
マーケティング部 03-3740-3245
www.philips-respironics.jp

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。
あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくは「マーケティング部」までお問合せください。
記載されている製品名などの固有名称は、Philips、Respironics、またはその他の会社の商標または登録商標です。

© 2011 Philips Respironics GK 110519 R1




2 ダウンロードしたデータの閲覧

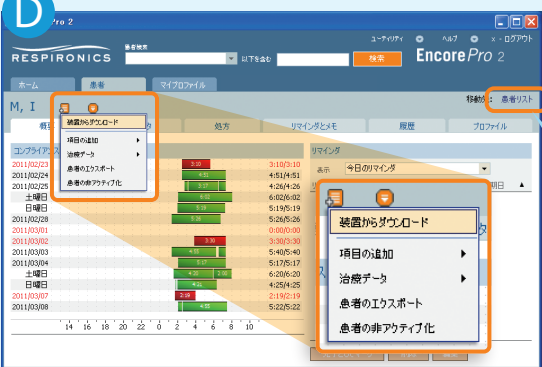


詳細オプションの **装置からダウンロード** をクリックします。

患者リストへ戻る時は…
画面右上の「患者リスト」をクリックします。

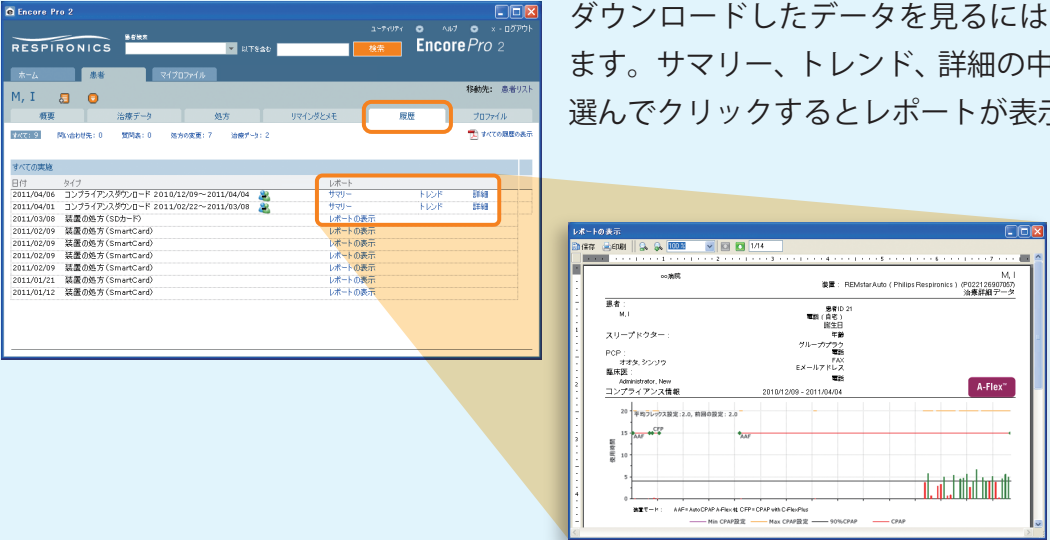


ダウンロードしたデータを見るには、履歴タブに切り替えます。サマリー、トレンド、詳細の中から閲覧したい項目を選んでクリックするとレポートが表示されます。

3 処方作成・変更・書き込み




データカードユーティリティ画面で **ダウンロード** をクリックします。

ダウンロード後にカード内データを消去する時はチェックを入れます。



「メディアを正常に取り込みました。」と表示されたら、ダウンロードは完了しました。

終了 をクリックしてカードを取り出します。



SDカード、またはEncoreProスマートカードをカードリーダーに挿し込みます。

処方タブを開きます。

処方の作成・変更を行う時は各項目（装置・加湿器・マスク・アクセサリ）の右側にある「新規追加」または、「編集」をクリックします。

エラーメッセージが出た時は…




Philips Respironics データカードが見つかりませんでした。

メディアが現在の患者のものではありません。

→ カードを挿し直してご確認ください。

→ 患者名が一致しているかご確認ください。

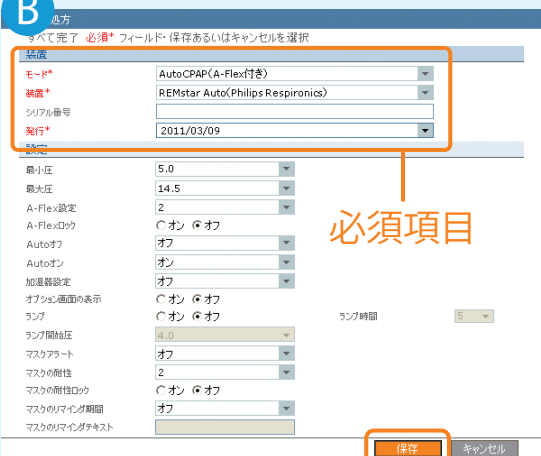

必須項目（モード／装置／発行日）を設定します。必要に応じてその他の設定を変更した後 **保存** をクリックします。

次に、保存した設定をカードに書き込みます。（次ページの **C** に進みます）